



軟性コルセット取扱説明書

装着者用

この度は、弊社の製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みいただき、製品を正しく安全にお使いください。

お読みになられた後は、保証書とともに大切に保管し、必要に応じてくりかえしお読みください。

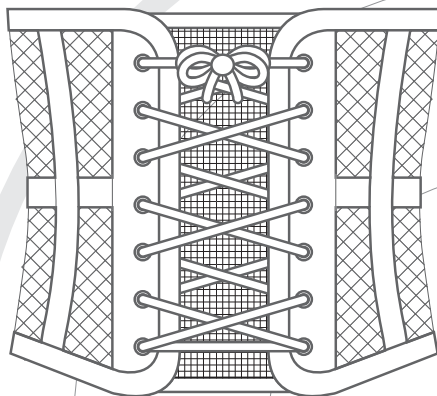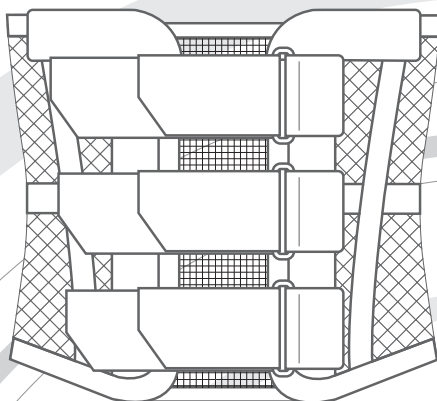

1. 安全にご使用いただくために



警告

誤った使い方をしたときに、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 必ず医師の指示に従って使用してください。
- 本製品を無断で修理、改造、調整しないでください。
- 使用目的以外のご使用はしないでください。
- 本製品に破損・異常が発生していないか、ご使用前には必ず各部を点検してください。
万一、破損・異常が発生した場合、又は発見した場合は、そのまま使用せず、必ず弊社までご連絡ください。
- 本製品を他の方への転用（再利用）された場合の事故等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 装着部に発赤やかぶれ、痛みが生じた場合、直ちに医師の指導を受けてください。
- 不適合が生じた場合や変形、磨耗、異音が生じた場合など、装具の異常は、身体を傷つけることがありますので、異常を発見した場合は、直ちに弊社までご連絡ください。
- 装具の機能操作は確実に行ってください。（特に継手部分の固定、解除の際には確実に操作してください。）
- 装着の際は、ベルト、紐等により適切な締め付けを行い、正しい位置を保持してください。
- 物理療法にて、マイクロ波、低周波の治療をされる場合は、必ずコルセットを外してください。




注意

誤った使い方をしたときに、使用中に不具合を生じ、障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- 装着や使用の際、継手等の可動部分で体の一部や衣服等を挟んだりして傷つける場合がありますので取り扱いには注意してください。
- 本製品は常温で使用、保管してください。（特に夏季の自動車の中など、高温で直射日光の当たる場所や、暖房器具の前に放置しないでください。）

お願い

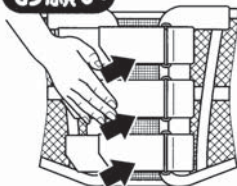

面ファスナーを
しっかり押さえて
ご使用ください。

不十分な場合、
接着力が得られず
危険です。

- 面ファスナーはしっかり押さえる事で接着されています。
- ご使用の際は、しっかり押さえて（圧力をかけて）ください。

コルセット・補装具 装用時の カイロ（貼るカイロ等温熱剤）の 取扱いについての注意点



注意

カイロ等温熱剤は、直接コルセット・補装具に貼らないようお願いします。



注意


金属部分（筋金部分）やプラスチック部分と身体との密着度が高い場所には、特に貼らないようお願いします。



注意

カイロ等どうしてもご使用される場合は、上記の事を守り、安全には十分注意をしてご使用ください。


2. 各部名称

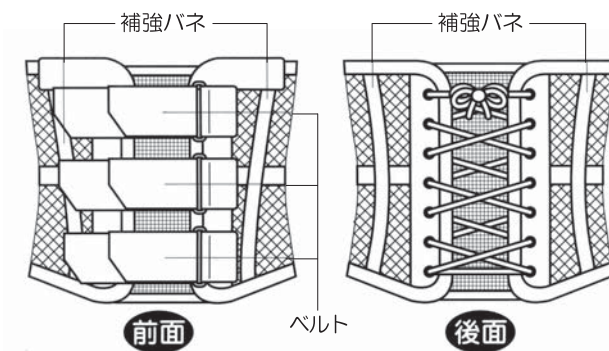

- 医師の処方により多少仕様の異なる場合があります。
- メッシュ生地に抗菌加工を施しています。

3. 装着方法


装着される前に、必ず肌着を1枚つけてください。

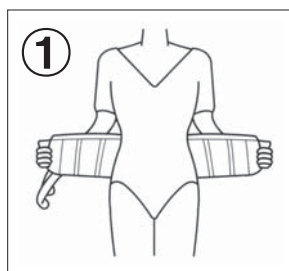

ひものある方を後ろにして、上下やウエストの位置を確かめてください。(ひもの結び目が上です)



最初に真ん中のベルトを締めてください。その時、コルセットの下縁が、骨盤に十分かかっているか確かめてください。

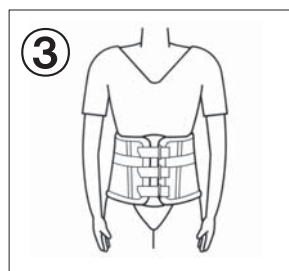

続けて、骨盤のベルト、一番上のベルトの順に締めてください。最後にもう一度、すべてのベルトを調節してください。

4. 装具 日常のお手入れ方法

汗をかいたり、装具が濡れたときは、風通しの良いところで陰干しをしてよく乾かしてください。

マジックテープの粘着力が低下している場合は、安全のため交換が必要となりますので弊社までご連絡ください。なお、毛玉等が付着した場合は、つまようじなどをマジックテープの表面に滑らせて取り除いてください。

洗濯は、中性洗剤で水もしくはぬるま湯にて押し洗いし、風通しの良いところで陰干しをしてよく乾かしてください。

柔軟剤、塩素系漂白剤は使用しないでください。

アイロン、乾燥機は使用しないでください。



5. 廃棄方法

各自治体の指示に従い、廃棄処分してください。

6. 保証とアフターサービス

保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

なお、軟性コルセットを修理・調整することで継続使用が可能な「耐用年数」の目安は1年6ヵ月です。

※18歳未満の方については、年齢による特殊性(成長対応)を踏まえた別途規定があります。各種公的制度（健康保険法、障害者総合支援法《旧・障害者自立支援法》、労働者災害補償保険法等）により支給された装具は、修理についても補助が受けられる場合があります。詳しくは弊社係員へご相談ください。

修理ご相談窓口

通常の 修理ご相談	最寄りのお客さま窓口までお電話ください
緊急の 修理ご相談	<p><緊急メンテナンスダイヤル></p> <p>関西地区（本社） 072-875-8999 受付時間：9：00 ～ 19：00（元日を除く）</p> <p>関東地区（東京本社） 03-5635-1611 受付時間：9：00 ～ 17：30（年末年始を除く）</p>

ご来社による緊急メンテナンス対応

下記の営業所では、ご来社のお客さまへの緊急メンテナンス対応を行っております。
ご来社される場合は、スムーズに対応できますよう、事前にご相談内容等をお電話でお知らせ
いただきますようお願い申し上げます。
(土日・祝日の訪問修理サービスは行っておりませんのでご了承ください。)

営業所	所在地	対応可能製品		
		義肢装具	姿勢保持具	車椅子
本 社	072-875-8999／大阪府大東市御領1-12-1 受付時間：9:00～17:30（元日を除く） ※通常のお問い合わせは「072-875-8020」まで	○	○	○
工 房 てんま	06-6352-1012／大阪市北区天神橋1-18-18 受付時間：9：00～17：30（年末年始を除く）	○	×	×
東 京 本 社	03-5635-1611／東京都江東区北砂1-19-9 受付時間：9：00～17：30（年末年始を除く）	○	○	○

※部品取寄せなどの理由で、製品をお預かりする場合がございます。
※弊社にお電話にてお問い合わせの際に、間違い電話が増えております。
お電話番号をよくお確かめの上、お間違えのないようお願い申し上げます。